

Gebrauchsanleitung Cellalux[®] - Pulser

Ständer



Lieferumfang



Sicherheit

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Erstbenutzung bitte vollständig durch.

Prüfen Sie die Bauteile des Cellalux Ständer nach dem Auspacken auf Beschädigungen.

Es ist darauf zu achten, dass die Einzelsegmente des Ständers mindestens 3 cm ineinander geschoben werden, um einen stabilen Halt zu gewährleisten.

Ziehen Sie die Klemmschrauben der Rohrfixierungen und des Ständerfußes Handfest an. Benutzen Sie keine Zangen oder andere Hilfsmittel.

Der Cellalux Pulser Ständer ist für den Betrieb ausschließlich in trockener Umgebung bestimmt.

Um Beschädigungen am Ständer zu vermeiden, lösen Sie die Klemmverbindungen durch vorsichtiges drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.

Prüfen Sie den festen Sitz des Cellalux Pulser nachdem Sie diesen in die Halteschale geschoben haben.

Das Gerät darf nicht mit beschädigten Komponenten betrieben werden.


Heben Sie diese Sicherheitshinweise bitte gut auf und geben Sie die sicherheitsrelevanten Informationen an andere Nutzer weiter.

Bedienung



Entpacken Sie den Ständer und fixieren zunächst den Ständerfuss
In einer stabilen Standposition.

Danach fixieren Sie die Teleskoprohre in der für Sie optimalen Höhe.

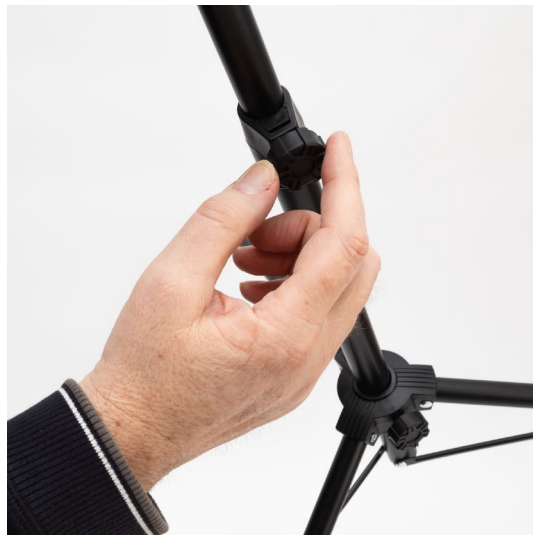

Bedienung



Setzen Sie das Oberteil des Ständers mit Schwanenhals und Aufnahmeschale in das obere Rohr des Ständers ein und fixieren es.

Der Schwanenhals mit der Aufnahmeschale kann nun in eine optimale Position für die Anwendungen geschwenkt werden.



Bedienung



Der Cellaux Pulsar wird von Oben in die Aufnahmeschale geschoben.



Wartung und Pflege

Reinigen Sie die Ständerkomponenten mit einem nebelfeuchten Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder kratzenden Reinigungsmittel.

Gewährleistung

Auf dieses hochwertige Produkt wird eine Herstellergarantie von 2 Jahren
(excl. Verschleißteile) ab Lieferdatum gewährt.

Die Garantie erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch, unberechtigtem Eingriff,
sowie durch ungeeignete Lagerung oder falschen Transport. Der Hersteller haftet
nicht für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

Reparaturen erfolgen ausschließlich über die Herstellerfirma Heathings GmbH.
Ein Zuwiderhandeln führt zum Garantieverlust.

Technische Daten

Abmessungen:

Cellalux® - Pulser - Ständer : ca. 650-1500mm x 600 mm

Gewicht ohne Pulser: ca. 1100 g

Gewicht mit Pulser: ca. 1500 g.

EG - Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass das Gerät
We declare that the assembly

Cellalux® - Pulser - Ständer

folgenden Richtlinien entspricht:
is in compliance with:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte Teil 2: Störfestigkeit Produktfamiliennorm (einschließlich Corrigendum: 1997) (IEC/CISPR 14-2: 1997 + A1: 2001) Deutsche Fassung EN 55014-2: 1997 + A1:2001

DKE/UK 767.11 EMV von Betriebsmitteln und Anlagen für häusliche, gewerbliche, industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen, die beabsichtigt oder unbeabsichtigt HF erzeugen, sowie von Beleuchtungseinrichtungen.

DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2002-08 DKE/UK 511.4 Raumheizgeräte DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1) Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil1: Störaussendung (IEC/CISPR 14-1:2005); Deutsche Fassung EN 55014-1:2006

Rücknahme & Entsorgung

Die Fa. Heathings GmbH verpflichtet sich laut WEEE2-Richtlinie 2012/19/EU sowie ElektroG2 zur Rücknahme und ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes in den Staaten der EU und des weiteren europäischen Kontinents.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes
verliert diese EG-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit

This declaration of EC conformity shall become null and void when the
assembly is subjected to any modification that has not met with our approval

Heathings GmbH
Melle, den 01.11.2021



Friedrich-Hermann Becker